


コメ 奉行シリーズ ② 品種特定キット

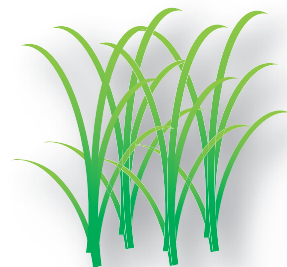

『コメ奉行シリーズ② 品種特定キット』はお手持ちのPCR装置と電気泳動装置で品種を特定できる試薬キットです。イネの種子(玄米・精米・粳)や葉において、遺伝子レベルでの正確な品種特定が可能です。種籾、育苗、圃場段階および流通段階での品種の確認にお役立てください。

業界初！SNPsにもとづく信頼性の高い品種特定

膨大なゲノム情報から厳選された19のSNPsでタイピングすることにより、きわめて信頼性の高い品種特定を可能にしました。あきたこまち・ひとめぼれなどコシヒカリから育成された近縁品種間でも判別することが可能です(対象品種は裏面)。


マルチプレックスPCR採用で試薬コストの削減

19のSNPsタイピングを4つのマルチプレックスPCRに集約することで、試薬コストを大幅に削減。4つの反応の組成・PCR条件は統一化されており、誰でもミスなく短時間で結果が得られます。

簡単な操作のみで品種特定


PCR反応⇒電気泳動(2%アガロースゲル/0.5×TBEバッファー)と、簡単な操作のみで品種特定の結果が得られます注)。

注)DNAが準備されている場合(OD₂₆₀/OD₂₈₀ 1.8~2.2の値のDNAをご用意ください)。

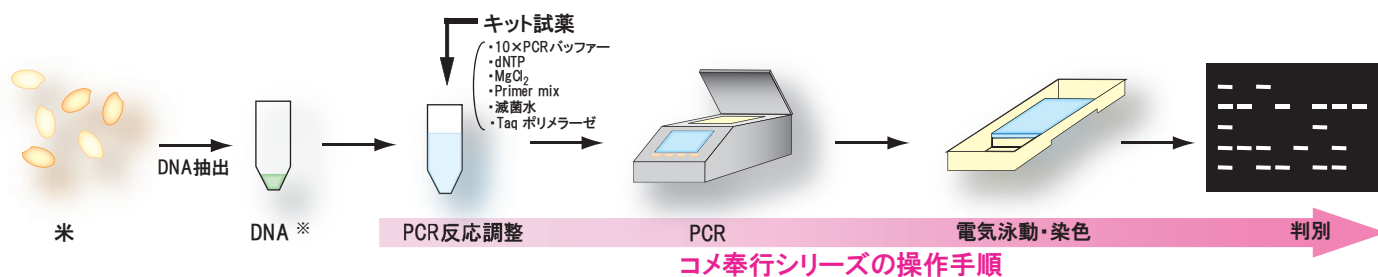

実施例)

<電気泳動結果>

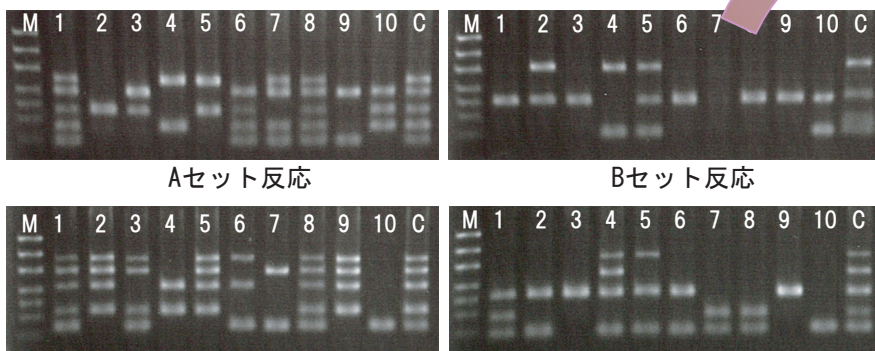

M:Size Marker, 1~7:サンプル, C:Control DNA

泳動結果を『品種特定ツール』に入力すれば、簡単に鑑別できます
(詳細は取扱説明書をご覧ください)

品種特定ツール

- ※方法
1. Aセット~Dセットのバンドパターンを入力します
バンド有りの場合は「+」、バンド無しの場合は「-」を入力します
入力していない場合は「未入力」と青字で、「+」「-」以外の文字を入力した時は「入力ミス」と赤字で欄の左側に表示されます
 2. 検体に含まれたセルに検出結果が表示されます
特定対象品種以外である場合は「その他の品種」と表示されます
また、バンドパターン入力時に「+」「-」以外の文字を入力している場合や

Band ID	Size(bp)	Result (有・無)
PA1	600	-
PA2	492	-
PA3	369	+
PA4	270	-
PA5	197	-

Band ID	Size(bp)	Result (有・無)
PB1	700	+
PB2	401	+
PB3	252	-
PB4	198	-

Band ID	Size(bp)	Result (有・無)
PC1	817	-
PC2	665	+
PC3	516	+
PC4	360	+
PC5	237	+

Band ID	Size(bp)	Result (有・無)
PD1	757	-
PD2	576	-
PD3	412	+
PD4	275	-
PD5	185	+

特定結果 **コシヒカリ**

品種特定対応品種リスト(112品種)

1 愛のゆめ	29 こがねもち	57 中生新千本	85 ほほほの穂
2 あかね空	30 コノエモチ	58 ナツヒカリ	86 まいひめ
3 あきげしき	31 こしいぶき	59 ななつぼし	87 まっしぐら
4 あきたこまち	32 コシヒカリ	60 にこまる	88 祭り晴
5 アキヒカリ	33 コシヒカリつくばSD1号	61 ニシホマレ	89 まなむすめ
6 アキニシキ	34 五百万石	62 日本晴	90 みえのえみ
7 あきほ	35 ゴロピカリ	63 能登ひかり	91 ミネアサヒ
8 あきろまん	36 ササニシキ	64 はえぬき	92 みのにしき
9 アケボノ	37 里のゆき	65 はくちょうもち	93 みやこがねもち
10 朝の光	38 春陽	66 ハツシモ	94 ミルキークイーン
11 朝日	39 スノーパール	67 八反錦1号	95 ミルキープリンセス
12 あさひの夢	40 大地の星	68 ハナエチゼン	96 むつほまれ
13 あやひめ	41 たかねみのり	69 はなさつま	97 もち美人
14 あわみのり	42 たかやまもち	70 はなの舞い	98 モチミノリ
15 いただき	43 たつこもち	71 華吹雪	99 やまのしずく
16 いわてっこ	44 玉栄	72 晴るる	100 ヤマヒカリ
17 LGCソフト	45 たんぼの夢	73 ひだほまれ	101 ヤマホウシ
18 おぼろづき	46 チヨニシキ	74 ひとめぼれ	102 ゆきの精
19 雄町	47 つがるおとめ	75 ヒノヒカリ	103 ゆきひかり
20 おまちかね	48 つがるロマン	76 ヒメノモチ	104 ゆきむすび
21 かけはし	49 月の光	77 ヒヨクモチ	105 ゆめあかり
22 風の子もち	50 つやおとめ	78 フクヒカリ	106 夢しずく
23 かりの舞	51 出羽燦々	79 ふくみらい	107 夢つくし
24 キタアケ	52 てんたかく	80 ふさおとめ	108 ユメヒカリ
25 キヌヒカリ	53 トドロキワセ	81 ふさこがね	109 ゆめひたち
26 きらら397	54 どまんなか	82 ふっくりんこ	110 ゆめみづほ
27 吟風	55 どんとこい	83 ほしたろう	111 ゆめみのり
28 コガネマサリ	56 どんぴしゃり	84 ほしのゆめ	112 わたぼうし

製品内容物(160反応分:各Primer mix反応×40)

1. AmpliTaq Gold DNA Polymerase
2. GeneAmp 10×PCR Gold Buffer
3. 25mM MgCl₂
4. 2mM dNTP Mix
5. Primer mix A
6. Primer mix B
7. Primer mix C
8. Primer mix D
9. Control DNA
10. DNA Size Marker Solution
11. 電気泳動用Loading dye

使用例

- ◎銘柄不明米、混入品種特定
- ◎ブレンド米のブレンド率調査
- ◎異株*の同定

*異株:周囲のイネ体とは異なる形状・出穂期などを示す株

製品仕様

Cat No.	KK-KB-02-02
商品名	コメ奉行シリーズ② 品種特定キット
輸送・保存温度	-20℃
価格	¥ 84,000(内税)

製品のお問い合わせ

株式会社 コッケン

〒047-0007 北海道小樽市港町4番3号

TEL:0134-24-8290 FAX:0134-24-8291

ホームページアドレス: <http://www3.ocn.ne.jp/~kokken/index.html>